

Produktdatablad **overlay mattress**



all on[®] er Levabo[®]s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter. Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.



Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Topmadras med differentieret trykaflastning



Standard seng med All On Overlay Mattress med Cover

Produkt beskrivelse

Topmadrasserne kan anvendes til:

- Standard enkelt seng
- Bårer

hvor det har vist sig at være særligt behageligt og giver en effektiv omfordeling af tryk.

Levabo topmadrasser er opdelt i 3 luftkamre, der tillader individuel aflastning af kroppen efter vægtfordeling. Hver luftsektion kan pumpes op med håndpumpe eller elektrisk pumpe inden for få sekunder, klar til brug.

Levabo Overlay Mattress er egnet til brug i både akutte og almindelige plejesituationer.

Coveret er inkontinens cover, vaskbart v.90° C. eller rengøres i autoklave v. max. 121° C.

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer all on[®] hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet.

Topmadrasserne er velegnede til effektiv forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.

Disse egenskaber gør all on[®] til en optimal madras, når den sengeliggende har behov for et komfortabelt og trykreducerende underlag.

Egenskaber/Fordele



- Designet til forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.
- Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så tryksårforebyggelse og behandling udføres optimalt.
- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- Enkel håndtering. All On[®] pumpes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.
- God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmtransporterende materiale.
- Leveres i ren, forseglet pakning inkl. pumpe.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

Coveret til All On Mattress:
Godkendelser og regulativer

Medical BI ELASTIC PES PU
Antibacterial and Antifungal:
ISO 22196:2011
PASS


Flammability BS 7175 ignition source 5
Pre-treatment: None
Method of Test: BS 7175: 1989 (2013) Section 3
PASS

Flammability BS 7177: 2008 + A1: 2011 Low Hazard
Method of Test: BS EN 597-1: 1995 & BS EN 597-2: 1995
PASS


EN 1021-1-2:
PASS

Levabo ApS
Sverigesvej 20A
8660 Skanderborg
Tel.: 31 70 40 25
info@levabo.dk
www.levabo.dk

Multi chamber technology

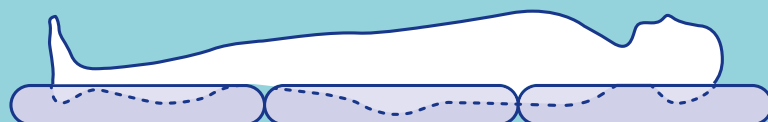

Ben 17% Midte 38% Overkrop 45%
Vægtfordeling (for en gennemsnitlig person på 90 Kg.)

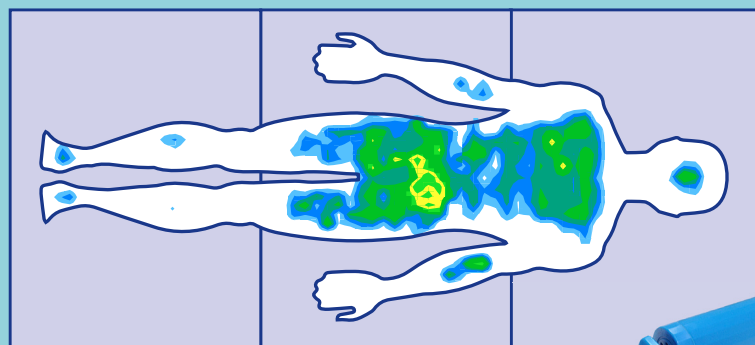

Pumpe medfølger

Produkt navn	Størrelse i cm	Pakning	Varenummer
All On Overlay Mattress med Cover	80 x 200 x 5	1 stk.	70106
All On Overlay Mattress uden Cover	80 x 200 x 5	1 eller 5 stk.	70052