DE

LEVABO®

Simple solutions - Big impact

turnall® Adapter



01 Adapter für 15- oder 30-Grad-Neigung



02 Adapter für einseitiges Kippen oder beidseitiges Kippen/Hug-Funktion



03 Adapter für die Hug-Funktion in allen Zyklen



04 Adapter für die statische Position oder die normale automatische Kippfunktion

Einfach zu montieren zwischen der Pumpe und dem Schlauch am Kippsystem

turnall® Adapter



1

Der Adapter wird am Schlauch befestigt

DER ADAPTER LÄSST SICH **EINFACH** ZWISCHEN DER PUMPE UND DEM SCHLAUCH AM NEIGUNGSSYSTEM INSTALLIEREN



2

Befestigen Sie dann den Adapter an der Pumpe

Sie können die Adapter 2 und 3 kombinieren, um zusätzliche Vorteile zu nutzen. *Die Kombinationsmöglichkeiten für jeden Adapter finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite in der Tabelle.*



2 Adapter in Kombination



3 Adapter in Kombination

turnall® Adapter

DER RICHTIGE ADAPTER SORGT FÜR SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT

Wählen Sie den Adapter, der den Bedürfnissen des Benutzers am besten entspricht, und gestalten Sie den Alltag mit mehr Freiheit, Sicherheit und Komfort

Adapter	2-in-1	Funktion	3-in-1	Funktion
01 Adapter für 15- oder 30-Grad-Neigung	🔴🟢	15- oder 30-Grad-Neigung + statische Position	🔴🟢⚫	15- oder 30-Grad-Neigung + statische Position + einseitige Neigung oder Umarmung
	⚫🟢	Umarmung oder einseitige Neigung um 15 oder 30 Grad		
	🟡🟢	Umarmungsfunktion in 15- oder 30-Grad-Position		
02 Adapter für einseitige oder beidseitige Neigungs-/Umarmungsfunktion	⚫🟢	Umarmung oder einseitige Neigung um 15 oder 30 Grad	🔴🟢⚫	15- oder 30-Grad-Neigung + statische Position + einseitige Neigung oder Umarmung
	🔴⚫	Umarmung in statischer Position		
03 Adapter für Umarmungsfunktion in allen Zyklen	🟡🟢	Umarmungsfunktion in 15- oder 30-Grad-Position		
	🔴🟡	Umarmungsfunktion in allen Zyklen + statische Position		
04 Adapter für die statische Position oder die normale automatische Kippfunktion	🔴🟢	15- oder 30-Grad-Neigung + statische Position	🔴🟢⚫	15- oder 30-Grad-Neigung + statische Position + einseitige Neigung oder Umarmung
	🔴⚫	Umarmung in statischer Position		
	🔴🟡	Umarmungsfunktion in allen Zyklen + statische Position		

Standardmäßig ist „Turn All“ auf eine Neigung von 30 Grad eingestellt. Um Ihnen mehr Optionen zu bieten, haben wir vier Adapter entwickelt. Alle Adapter können natürlich einzeln angebracht werden. Darüber hinaus lassen sie sich zu Zweier- oder Dreiergruppen kombinieren. Die Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen und ihre Funktionen. *Beachten Sie, dass bei Kombinationen mit dem roten Adapter dieser immer am nächsten an der Pumpe platziert werden muss.* Die Farbkombinationen müssen beachtet und in der angegebenen Reihenfolge angebracht werden, von der Pumpe zum Schlauch.

01 | Adapter für 15- oder 30-Grad-Neigung


Artikelnummer 76167



Der grüne Adapter kommt zum Einsatz, wenn anstelle der voreingestellten 30 Grad, mit denen „Turn All“ normalerweise arbeitet, eine Neigung von 15 Grad gewünscht ist.

Für wen ist er geeignet?

Der Adapter kann für Personen relevant sein, die empfindlich auf Veränderungen in ihrer täglichen Routine reagieren oder der Umlagerung und Lagerung skeptisch gegenüberstehen. In solchen Fällen kann eine Neigung von 15 Grad eine sanftere Lösung sein. In der Praxis bedeutet dies eine Neigung von 15 Grad auf einer Seite und eine Gegenneigung von etwa 5 Grad auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn Sie zur Standardeinstellung zurückkehren möchten, entfernen Sie einfach den Adapter oder drehen Sie ihn auf 30 Grad.

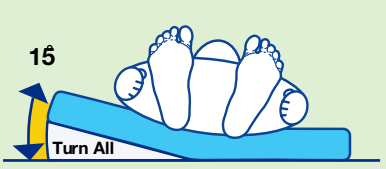

Position A

15-Grad-Neigung (in allen Zyklen)



Position B

30-Grad-Neigung (in allen Zyklen)





02 | Adapter für einseitiges Kippen oder beidseitiges Kippen/Hug-Funktion

Artikelnummer 76210



Der schwarze Adapter kommt zum Einsatz, wenn eine Neigung nur in eine bestimmte Richtung gewünscht ist. Wenn ein Patient beispielsweise nicht auf einer Seite liegen möchte oder dazu nicht in der Lage ist, kann der Adapter so eingestellt werden, dass er ausschließlich in die gewünschte Richtung neigt. (Drehen Sie das runde Rad.)
Der Adapter kann auch auf eine „Umarmungsfunktion“ eingestellt werden, bei der der Patient nicht einfach von einer Seite zur anderen „gekippt“ wird, sondern stattdessen sicher in einer umhüllenden Position liegt. Dies kann für Patienten von Vorteil sein, die mehr Komfort benötigen. (Drehen Sie auf das Symbol für die „Umarmungsfunktion“.)

Wer nutzt es?
Für die einseitige Neigung eignet sich der Adapter beispielsweise für Personen mit Druckgeschwüren oder Frakturen auf einer Körperseite oder für diejenigen, die eine bevorzugte Liegeposition haben. Die Umarmungsfunktion kann für Personen mit Skoliose sowie für diejenigen geeignet sein, die im Alltag mehr Sicherheit benötigen. Darüber hinaus kann sie für Bewohner von Vorteil sein, die ein gesteigertes Körperbewusstsein benötigen, sowie für Personen mit psychischen Erkrankungen.




Position A
Einseitige Neigung (links)




Position C
Umarmungsfunktion / beidseitige Neigung



Position B
Einseitige Neigung (rechts)

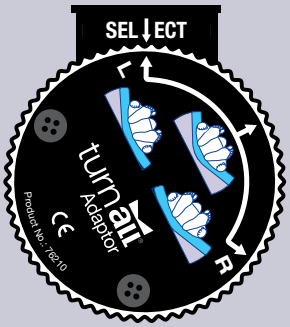

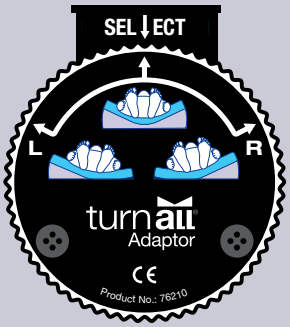



03 | Adapter für die Hug-Funktion in allen Zyklen

Artikelnummer 76168




Der gelbe Adapter wird verwendet, wenn Sie für das an der Pumpe eingestellte Zeitintervall (30, 60 oder 90 Minuten) in der Umarmungsposition liegen möchten. Wenn beispielsweise 30 Minuten ausgewählt sind, liegt der Patient zunächst 30 Minuten lang in der Umarmungsposition und anschließend 30 Minuten lang auf dem Rücken. Danach wechselt das System automatisch im gewählten Intervall zwischen der „Umarmungsposition“ und der Rückenlage. Die Positionierung in der „Umarmungsposition“ ist vorteilhaft, da sie durch die Ausschüttung des Hormons Oxytocin ein Gefühl von Sicherheit, Ruhe und körperlichem Wohlbefinden fördert. Es ist eine wirksame Methode, um Stress abzubauen, Schmerzen zu lindern und die Schlafqualität zu verbessern.

Wer nutzt es?

Der Adapter eignet sich möglicherweise für Personen, die ein Blutgerinnsel hatten, nach einem Unfall gelähmt sind, sich in der postoperativen Phase befinden oder aufgrund von Medikamenten oder einem Koma vorübergehend immobil sind.

Umarmungsfunktion

Beidseitige Neigung wie folgt:
30, 60 oder 90 Minuten.

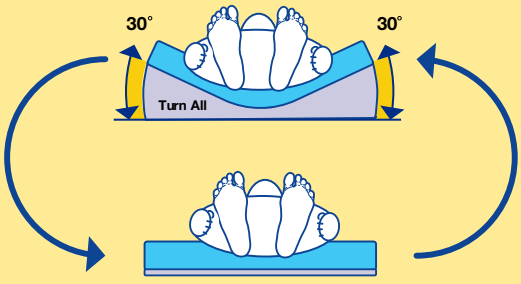


30 Minuten auf dem Rücken



04 | Adapter für die statische Position oder die normale automatische Kippfunktion


Artikelnummer 76175

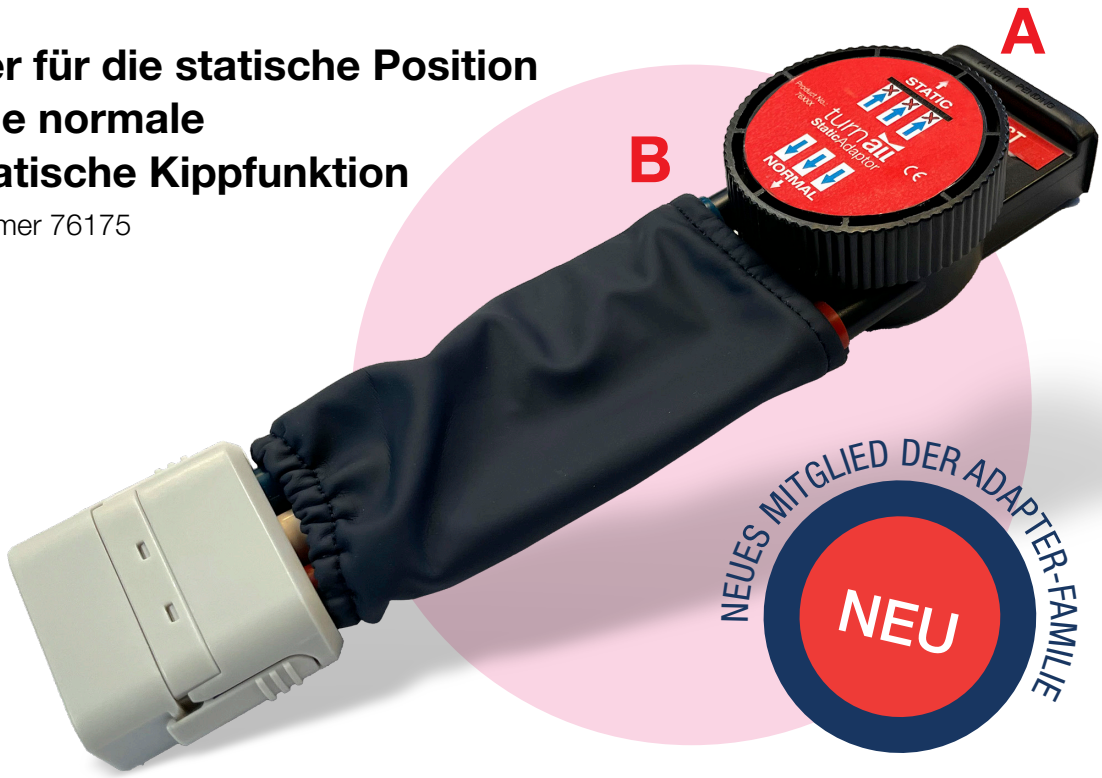

Der rote Adapter kommt zum Einsatz, wenn eine statische Neigung zu einer Seite gewünscht ist, ohne dass eine automatische Neigungsfunktion erforderlich ist. Er sorgt für eine stabile und kontrollierte Lagerung, sodass der Patient in dieser Position verbleiben kann, bis eine neue Position gewählt wird.

Wer nutzt ihn?

Der Adapter eignet sich besonders für Patienten, die eine ruhige und stabile Lagerung benötigen. Dazu gehören beispielsweise Patienten mit zahlreichen Schläuchen, Drainagen oder Kathetern, bei denen Bewegungen das Risiko eines Verrutschens erhöhen können. Er kann auch bei Patienten mit Atemproblemen eingesetzt werden, bei denen eine stabile Position die Atmung unterstützt. Darüber hinaus kann er für Patienten mit Schmerzen oder unruhige Patienten relevant sein, die möglicherweise negativ auf wiederholte Bewegungen reagieren, sowie für immobile oder gebrechliche Patienten, bei denen eine statische Lagerung wichtig ist, um Komplikationen wie Druckgeschwüre und Beschwerden zu vermeiden.

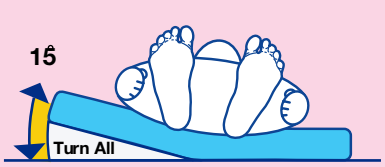


Position A
Statische Position



Position B
Normale Neigungsfunktion



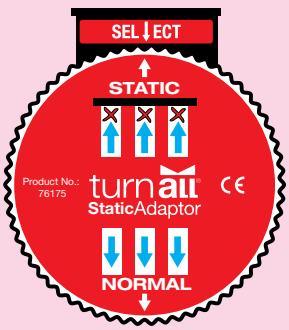

Wohlfahrtstechnologie
die **Ihnen** hilft
anderen zu helfen












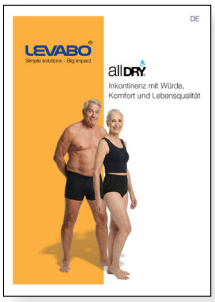



Scannen Sie den QR-Code,
um auf unsere Kataloge für All Dry,
All Up, Heel Up, Seat All, Turn All,
Adapter und MultiPatient zuzugreifen.

Levabo ist nach der Norm ISO 13 485 zertifiziert.

CE Alle Produkte von Levabo sind CE-gekennzeichnet
und entsprechen vollständig der MDR 2017 / 745

ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

LEVABO®
Simple solutions - Big impact

Levabo ApS
Sverigesvej 20A
8660 Skanderborg
Tel.: +45 31 70 40 25
Mail: info@levabo.dk
www.levabo.com

Turn All Adaptor Total DE 06.07.2026 V2