DK

LEVABO®

Simple solutions - Big impact

turnall® Adaptere



01

Adapter for 15 eller 30 graders kip



02

Adapter for enkeltsidet kip eller dobbeltsidet kip/kramme-funktion



Adapter for kramme-funktion i alle cyklus

03



04

Adapter for statisk position eller normal automatisk kipfunktion

Monteres nemt mellem pumpen og slangen på kipsystemet

turnall® Adaptere



1

Adapteren sættes fast på slangen

ADAPTEREN MONTERES **NEMT** MELLEM PUMPEN OG SLANGEN PÅ KIPSYSTEMET



2

Derefter sættes adapteren fast på pumpen

Man kan kombinere både 2 og 3 adaptere for yderligere fordele

Se kombinationsmuligheder ved den enkelte adapter eller i skemaet på modstående side.



2 adaptere i kombination



3 adaptere i kombination

turnall® Adaptere

DEN RIGTIGE ADAPTER GIVER TRYGHED OG FLEKSIBILITET

Vælg den adapter, der passer bedst til borgerens behov
og skab en hverdag med større frihed, sikkerhed og komfort

Adapter	2 kombi	Funktion	3 kombi	Funktion
01 Adapter for 15 eller 30 graders kip	🔴🟢	15 eller 30 graders kip + statisk position	🔴🟢⚫	15 eller 30 graders kip + statisk position + enkeltsidet kip eller kram
	⚫🟢	Kram eller enkeltsidet kip i 15 eller 30 grader		
02 Adapter for enkelt- eller dobbeltsidet kip/ krammefunktion	⚫🟢	Kram eller enkeltsidet kip i 15 eller 30 grader	🔴🟢⚫	15 eller 30 graders kip + statisk position + enkeltsidet kip eller kram
	🔴⚫	Kram i statisk position		
03 Adapter for krammefunktion i alle cyklus	🟡🟢	Krammefunktion i 15 eller 30 graders position		
	🔴🟡	Krammefunktion i alle cyklus + statisk position		
04 Adapter for statisk position eller normal automatisk kipfunktion	🔴🟢	15 eller 30 graders kip + statisk position	🔴🟢⚫	15 eller 30 graders kip + statisk position + enkeltsidet kip eller kram
	🔴⚫	Kram i statisk position		
	🔴🟡	Krammefunktion i alle cyklus + statisk position		

Turn All er indstillet til 30 graders kip. For at tilbyde flere muligheder har vi udviklet 4 adaptere. Alle adaptere kan selvfølgelig påsættes enkeltvis. Derudover kan de kombineres 2 eller 3 stk. sammen. I skemaet kan du se kombinationsmuligheder og følgende funktion. *Bemærk at i kombinationer hvor den røde adapter indgår, skal denne **altid** placeres tættest på pumpen.* Farvekombinationerne følges og påsættes i viste rækkefølge fra pumpen til slangen.

turnall® Adaptere

01 | Adapter for 15 eller 30 graders kip

Varenr. 76167 / HMI-nr. 144150



Den grønne adapter anvendes, når der ønskes et kip på 15 grader i stedet for de forudindstillede 30 grader, som Turn All normalt arbejder med.

Hvem bruger den?
Adapteren kan være relevant for borgere, der er følsomme over for forandringer i hverdagen eller skeptiske over for vendinger og lejring. Her kan et kip på 15 grader være en mere skånsom løsning. I praksis betyder det 15 graders kip i den ene side og ca. 5 graders medkip i den modsatte side. Ønskes standardindstillingen igen, fjernes adapteren blot eller drejes om på 30 grader.



Position A
15 graders kip (i alle cyklus)



Position B
30 graders kip (i alle cyklus)





02 | Adapter for enkeltsidet kip eller dobbeltsidet kip/krammefunktion

Varenr. 76210 / HMI-nr. 144151



Den sorte adapter anvendes, når der kun ønskes kip i én bestemt side. Hvis en borger f.eks ikke ønsker eller kan ligge på den ene side, kan adapteren indstilles til udelukkende at kippe i den ønskede side. *(Drej på det runde hjul)*. Adapteren kan desuden indstilles til en *krammefunktion*, hvor borgeren ikke blot "vippes" fra side til side, men i stedet ligger stabilt i en omsluttende position. Dette kan være en fordel for borgere med behov for øget tryghed. *(Drej til symbolet for krammefunktionen)*.

Hvem bruger den?


Ved enkeltsidet kip kan adapteren være relevant for borgere med eksempelvis tryksår eller fraktioner på den ene side af kroppen eller borgere med en foretrukken liggestilling. Krammefunktionen kan være relevant for borgere med skoliose samt borgere med behov for øget tryghed i hverdagen. Derudover kan den være gavnlig for borgere med behov for øget kropssansning samt borgere med psykiske lidelser.



Position A
Enkeltsidet kip (venstre)

Position C
Krammefunktion / dobbeltsidet kip

Position B
Enkeltsidet kip (højre)

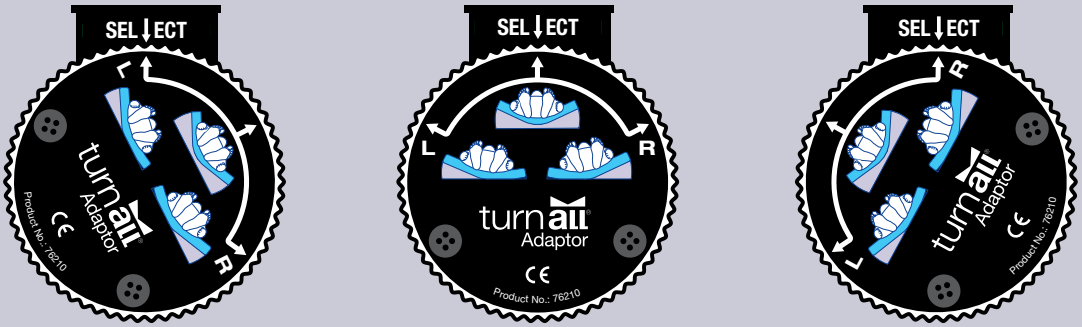

03 | Adapter for krammefunktion i alle cyklus

Varenr. 76168 / HMI-nr. 144152




Den gule adapter anvendes, når man ønsker at ligge i kram-position i det tidsinterval, som pumpen er indstillet til (30, 60 eller 90 minutter). Vælges f.eks 30 minutter, ligger borgeren først i kram-position i 30 minutter og derefter på ryggen i 30 minutter. Herefter skifter systemet automatisk mellem kram-position og rygleje i det valgte interval. Lejring med "kram" er godt, fordi det skaber tryghed, ro og fysisk velvære gennem frigivelsen af hormonet oxytocin. Det er en effektiv metode til at reducere stress, dæmpe smerter og forbedre søvnkvaliteten.

Hvem bruger den?

Adapteren kan være relevant for borgere, der har haft en blodprop, har lammelser efter en ulykke, er post-operative eller kortvarigt er immobile på grund af medicin eller koma.

Krammefunktion

Dobbeltsidet kip som følger 30, 60 eller 90 minutter.

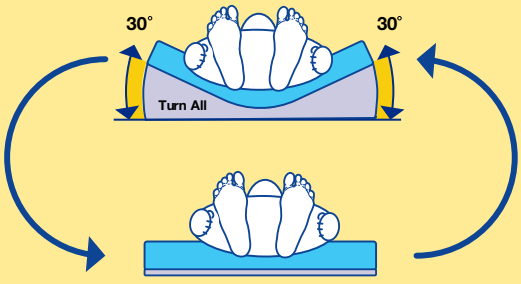

30 minutter på ryggen



04 | Adapter for statisk position eller normal automatisk kipfunktion


Varenr. 76175 / HMI-nr. 148073



Den røde adapter anvendes når der ønskes et statisk kip i én side uden automatisk kipfunktion. Det giver en stabil og kontrolleret lejring, hvor borgeren forbliver indtil der vælges ny position.


Hvem bruger den?

Adapteren er særlig relevant for borgere med behov for rolig og stabil lejring. Det kan f.eks være borgere med mange slanger, dræn eller katetre, hvor bevægelse kan øge risikoen for forskydning. Den kan også anvendes til borgere med respiratoriske udfordringer, hvor en stabil position understøtter vejrtrækningen. Derudover kan den være relevant for smertepåvirkede eller urolige borgere, som kan reagere negativt på gentagne bevægelser, samt for immobile eller svækkede borgere, hvor statisk positionering er vigtig for at forebygge komplikationer som tryksår og ubehag.

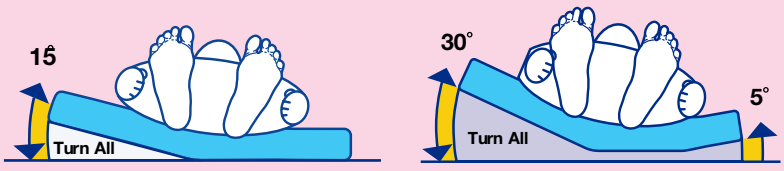

Position A
Statisk position

Position B
Normal kipfunktion

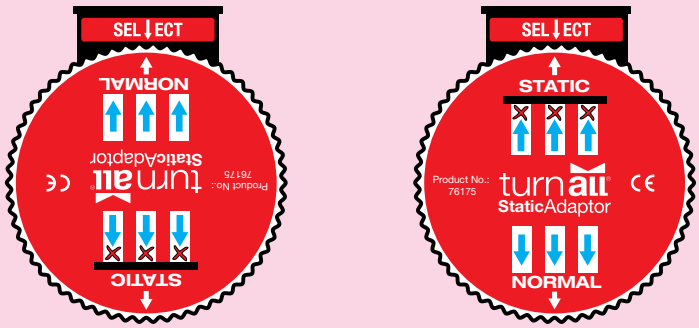

Velfærdsteknologi
der hjælper **dig**
med at hjælpe **andre**



Scan QR-koden og få adgang
til vores kataloger om All Dry,
All Up, Heel Up, Seat All, Turn All,
Adaptere og MultiPatient

Levabo er certificeret i henhold til ISO-standard 13 485

CE Alle Levabos produkter er CE-mærket
og overholder MDR 2017 / 745

ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

LEVABO®
Simple solutions - Big impact

Levabo ApS
Sverigesvej 20A
8660 Skanderborg
Tel.: +45 31 70 40 25
Mail: info@levabo.dk
www.levabo.com

Turn All Adaptor Total DK 30.06.2026.V3